


Monopolare Schere




Die monopolare Schere ist ein steriles Einweginstrument mit einer Metzenbaum-Klinge, monopolarer elektrochirurgischer Fähigkeit und einem rotierenden isolierten Schaft mit 5 mm Durchmesser. Die Scheren sind für die Verwendung bei minimal-invasiven Eingriffen vorgesehen, die den Einsatz von monopolaren Schneiden und/oder Koagulieren erfordern.

- Koagulation und Transsektion von Gefäßen und Gewebe
- Komfortables, scharfes Einweginstrument vermeidet Kosten für die Wiederaufbereitung und Sterilisation
- Scharfe Metzenbaum-Klingen ermöglichen ein präzises Schneiden auf ganzer Länge der Klinge
- Die monopolaren Scheren sind mit elektrochirurgischen Geräten kompatibel

Die Instrumente können nur mit monopolaren elektrochirurgischen Generatoren in Übereinstimmung mit den Normen IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 und IEC 60601-2-2, einschließlich der geltenden nationalen/regionalen Bestimmungen, verwendet werden. Die Instrumente sind mit monopolaren elektrochirurgischen Generatoren von 2000 V & 390 kHz im schneidenden Modus; 3500 V & 390 kHz im Koagulationsmodus kompatibel. Empfohlene maximale Diathermieeinstellung zum Schneiden sind 50 W und zum Koagulieren 70 W. Die Höchstspannung beträgt 5,5 kVp.

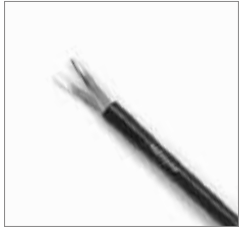

Scherenklinge

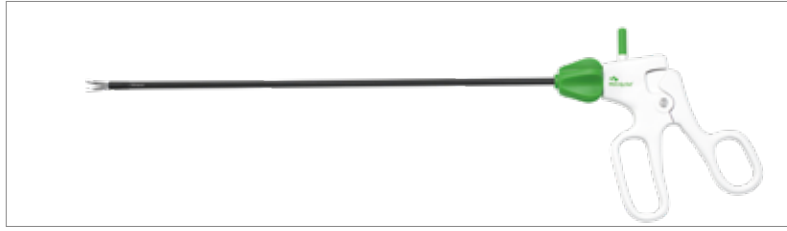

Monopolare Metzenbaum-Scheren



Monopolare Instrumentenkabel

Art.-Nr.	Beschreibung	Ø	Länge	IV / VSK
899216	Monopolare Schere – Metzenbaum	5 mm	33 cm	10 / 100
899217	Monopolare Schere – Mini Metzenbaum	5 mm	33 cm	10 / 100
899218	Monopolare Schere – Metzenbaum	5 mm	45 cm	10 / 100

IV / VSK = Innenverpackung / Versandkarton

Art.-Nr.	Beschreibung	Ø	Länge	IV / VSK
899110	Monopolares Instrumentenkabel	4 mm	3 m	40 / 400
899111	Monopolares Instrumentenkabel	8 mm	3 m	40 / 400

Material: DEHP- und Latex-frei

Allgemeine Informationen

Sterilisation: Ethylenoxid

Haltbarkeit: Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum.

Verpackung: Das Produkt ist innen in einen Polyethylen-Beutel und außen in einen Tyvek-Beutel verpackt. Die Innenverpackung ist aus weißem Karton und der Versandkarton aus braunem Karton (keine Chlorbleiche verwendet).

Material: DEHP- und Latexfrei.

Entsorgung: Befolgen Sie die örtlichen Richtlinien für kontaminierte Produkte.

Hersteller: Unimax Medical Systems Inc.;
Import und Vertrieb durch Mölnlycke Health Care AB.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.com